



# TOURNIQUET

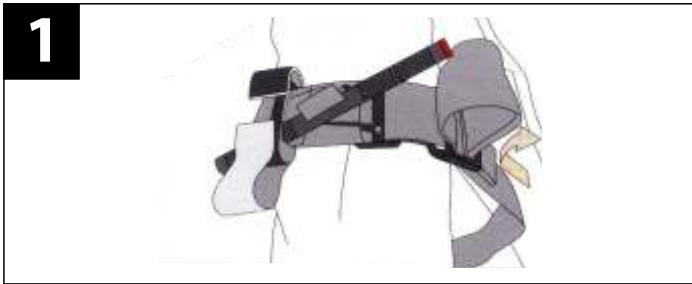


## BEIDHÄNDIGE ANWENDUNG

Legen Sie das Band **um die verletzte Gliedmaße** und führen es von unten kommend um den Schnallensteg. Positionieren Sie das Tourniquet wenn möglich\* 5-7cm oberhalb der Wundstelle.

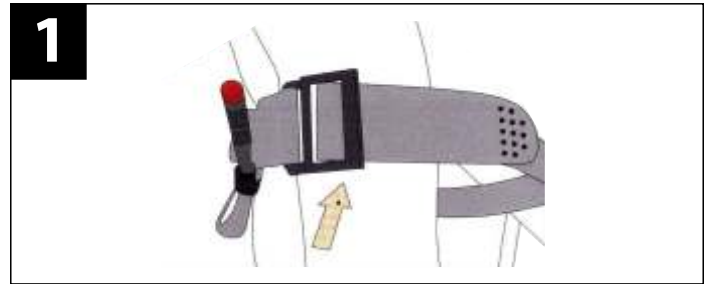


## EINHÄNDIGE ANWENDUNG


Führen Sie die verletzte Gliedmaße **durch die Schlaufe** im Band und positionieren Sie das Tourniquet wenn möglich\* 5-7cm oberhalb der Wundstelle.

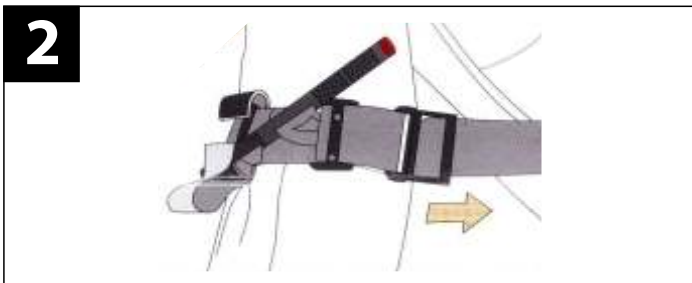


Das Band sollte immer sowohl um den Schnallensteg als auch um die Gleitzähne der Schnalle geführt werden. Ziehen Sie das Band so fest an, dass es nicht möglich ist, 3 Finger zwischen Band und Extremität zu bringen. Sichern Sie diese Einstellung, indem Sie den größtmöglichen Teil des überstehenden Bandes mit der Bandschleufe verkleben und verstreichen.

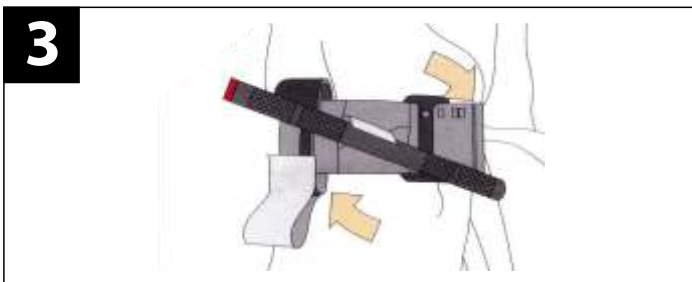

Drehen Sie den Knebelstab bis die Blutung stoppt. Prüfen Sie den distalen Puls unterhalb der Aderpresse in der Nähe der Wunde; dieser sollte nicht mehr tastbar sein.

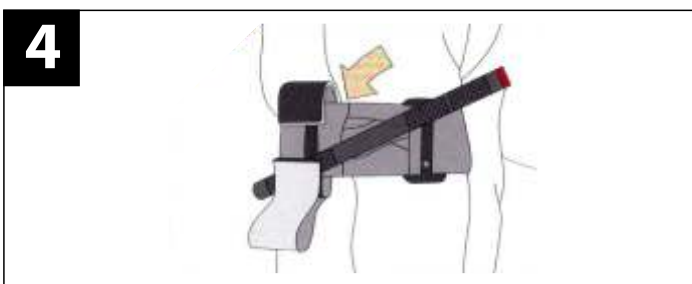

Sichern Sie den Knebelstab in dem Clips, um ihn zu fixieren. Hält die Blutung an oder ist weiterhin ein distaler Puls unter der Aderpresse tastbar, sollte die Aderpresse stärker angezogen werden oder eine zweite Aderpresse oberhalb der ersten angelegt werden. Erneut die Wirksamkeit der Maßnahme prüfen!

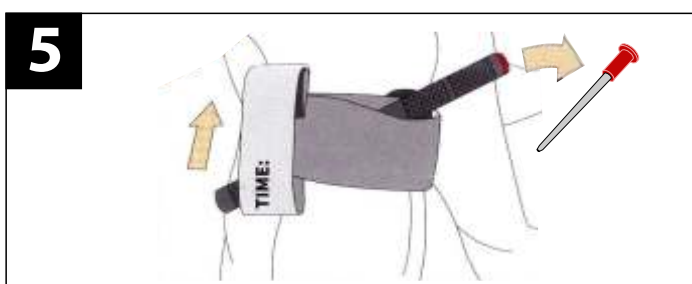

Legen Sie das restliche Band zwischen Clip und Knebelstab und sichern Sie den Knebelstab und das Band mit dem Sicherungsklett mit der Aufschrift „TIME:“. Notieren Sie auf diesem Sicherungsklett mit dem im Knebelstab untergebrachten Stift die Zeit der Applikation. Erwägen Sie eine weitere Sicherung mit medizinischem Klebeband. Stellen Sie sicher, dass der Druckverband für das medizinische Personal sichtbar ist.

\*Sollten Sie die genaue Blutungsstelle nicht identifizieren können oder steht Ihnen dafür nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, kann situationsabhängig eine effektive Anlage des Tourniquet so proximal wie möglich an der Extremität auch auf der Kleidung erfolgen. Dabei darf das Tourniquet aber **keinesfalls über harten Gegenständen** in der Kleidung angelegt werden. Die Extremität sollte dann aber schnellstmöglich erneut untersucht werden und das Tourniquet entsprechend der Anleitung neu direkt auf der Haut angelegt werden.


# Instruction

# TOURNIQUET

IMPORTEUR: Nakatanenga 4x4-Equipment - Inh. Peter Hochsieder e.K.  
Ludwig-Erhard-Ring 30 - 92348 Berg - www.nakatanenga.de


CE NL-CA002  
2020-53606

 **Nakatanenga**  
4x4-Equipment  
... bärenstark seit 1995

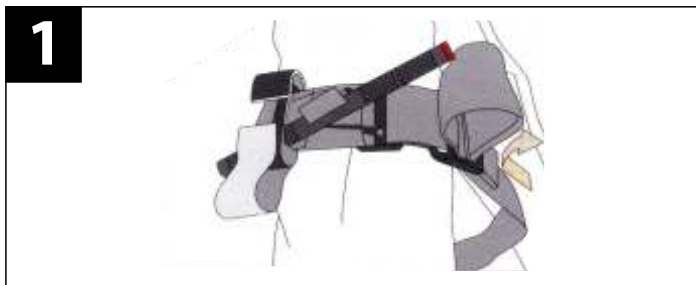





## TWO-HANDED APPLICATION

Route and band around the limb, and pass the tip through the gaps for the buckle. Position the tourniquet 2-3" above the wound site.

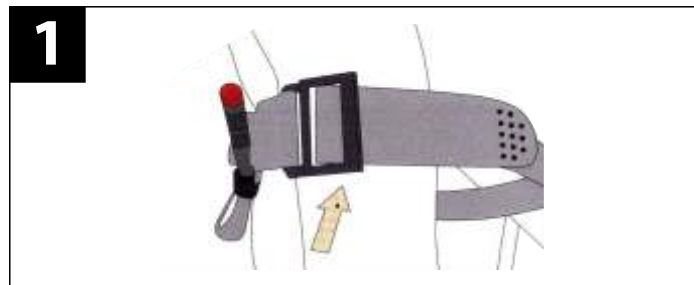

## ONE-HANDED APPLICATION

Insert the injured limb through the loop in the band and position the tourniquet 2-3" above the bleeding site directly to the skin.

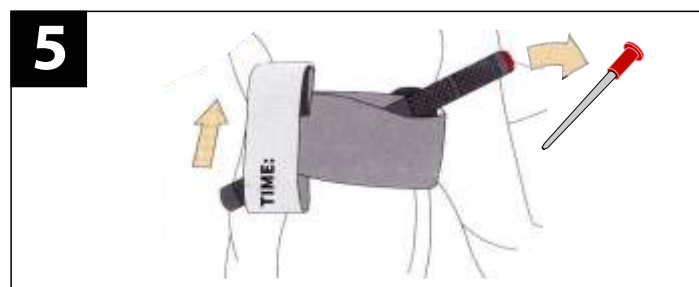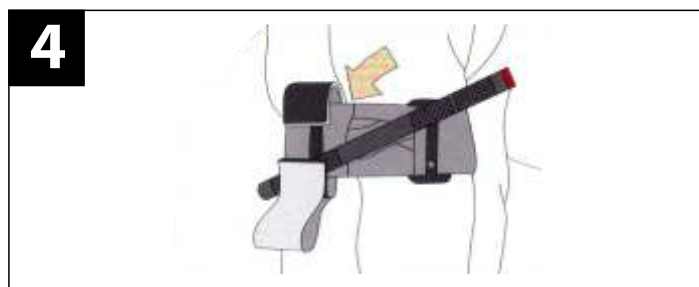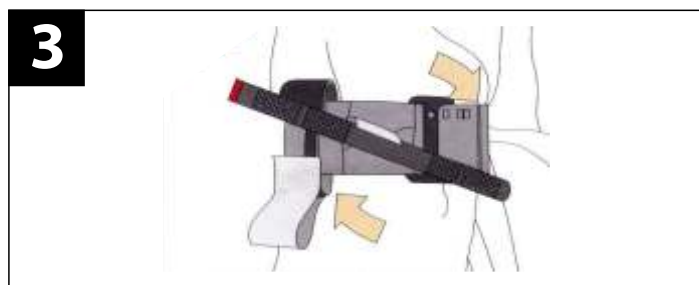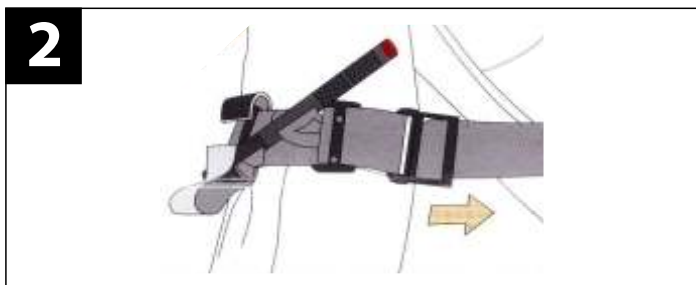

The band should always travel around both, the rolling pin and sliding teeth in the buckle. Pull the band tight and fasten it back on itself, all the way around the limb but not over the rod clips. The band should be tight enough so that 3 fingers cannot slide beneath it. If they can, re-tighten and secure.

Twist the rod until bleeding has stopped. Also check for distal pulse beneath the tourniquet near the wound, this should disappear.

Secure the rod inside the clips to lock it in place. Check for bleeding and distal pulse. If bleeding continues or distal pulse is present below the tourniquet, consider additional tightening or applying a second tourniquet above the first. Reassess.

Route the band between the clips and over the rod. Secure the rod and band with the TIME strap. Record time of application with the pen at the top. Consider further securing with medical tape. Ensure tourniquet is visible for medical personnel.

\*If you are unable to identify the exact site of bleeding or if you do not have sufficient time to do so, the Tourniquet can be applied effectively as proximal as possible to the limb, including on the clothing, depending on the situation. However, the Tourniquet must never be applied over hard objects in the clothing. The limb should then be re-examined as soon as possible and the Tourniquet applied directly to the skin according to the instructions.